

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Подголовники, опоры, натяжители. Описание

Подголовник специальный

Специальный подголовник WS-21.4 предназначен для поддержания головы пациента в положениях полулежа или лежа, как лежа на спине, так и лицом вниз. Благодаря трем осям вращения, конструкция подголовника, обеспечивает широкий диапазон регулировок по высоте, углам наклона и глубине относительно ложа операционного стола. Надежный фиксатор рычажного типа позволяет быстро и точно установить подголовник в необходимом положении. Подголовник совместим со специальными гелевыми подушками (см. раздел "СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРАЦЫ").

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и подковообразной рабочей части выполненной из прочного алюминиевого сплава.

Возможность регулировки подголовника по высоте, глубине и углу наклона.



Подголовник специальный

Специальный подголовник WS-21.5 предназначен для поддержания головы пациента в положениях полулежа и лежа, как лежа на спине, так и лицом вниз. Благодаря трем осям вращения, конструкция подголовника, обеспечивает широкий диапазон регулировок по высоте, углам наклона и глубине относительно ложа операционного стола. Небольшая рейка для принадлежностей, имеющаяся с наружной стороны подголовника, позволяет установить роликовый держатель WS-88.5 (не входит в комплект) для вертебральных операций. Подголовник совместим со специальными гелевыми подушками (см. раздел "СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРАЦЫ").

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса подковообразной формы.

Габариты рабочей части: 235мм x 190мм x 70мм

Возможность регулировки подголовника по высоте, глубине и углу наклона.



Подголовник для операций на шейном отделе

Специальная секция WS-21.8 предназначена для поддержания головы пациента в положениях полулежа и лежа, как лежа на спине, так и лицом вниз, для обеспечения оптимального доступа к шейному отделу позвоночника. Конструкция подголовника обеспечивает возможность независимой регулировки высоты каждого из двух матрацев. Регулируемая по высоте напольная опора обеспечивает стабильность даже при больших нагрузках. Небольшая рейка для принадлежностей, имеющаяся с наружной стороны подголовника, позволяет установить роликовый держатель WS-88.5 (не входит в комплект) для вертебральных операций.

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и двух бесшовных (литых) полиуретановых матрацев.

Возможность регулировки каждой части подголовника по высоте и глубине.




Роликовый держатель для вертебральных операций

Роликовый держатель WS-88.5 предназначен для тракции шейного отдела позвоночника при большинстве цервикальных операций и может быть установлен на некоторых специальных подголовниках FAMED, оборудованных европланкой.

Конструкция держателя рассчитана на подвешивание специальных гирь различной массы, подвешенных на тросике (гири и тросик не входят в комплект), установленном на роликовом натяжителе, что обеспечивает необходимое растяжение шейного отдела и увеличивает расстояния между позвонками.

Держатель и крепление для установки на европланку специального подголовника изготовлены из нержавеющей стали с матовой отделкой.

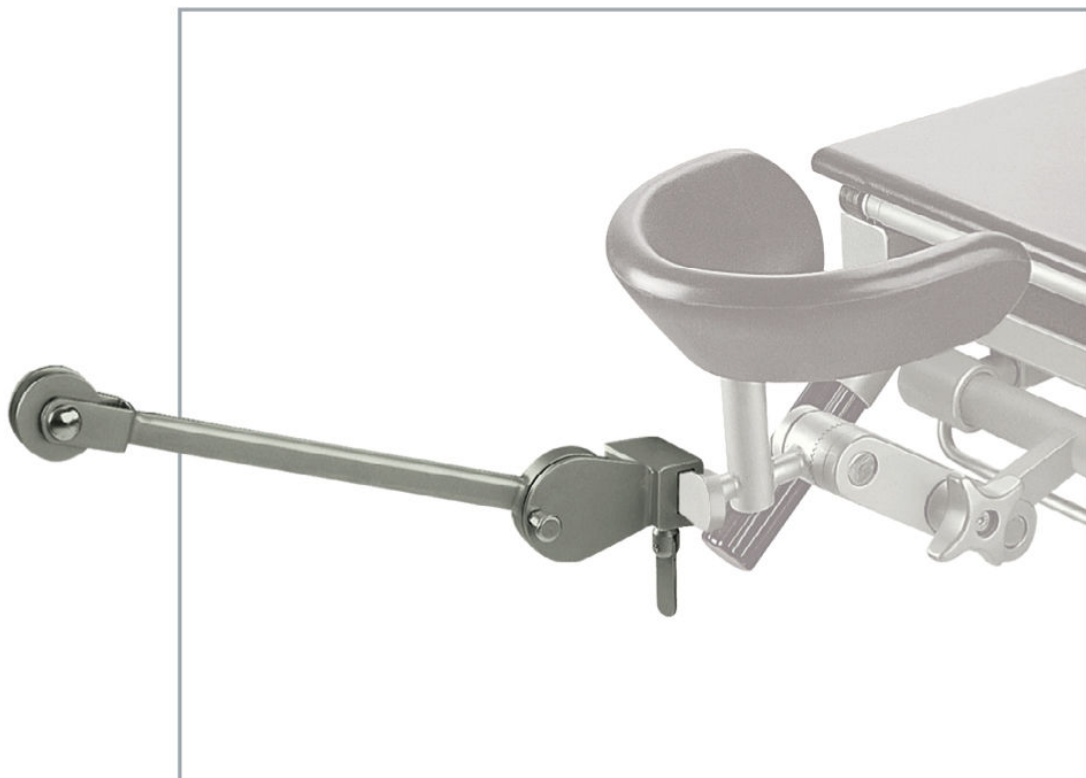


Подголовник специальный

Специальный подголовник WS-21.9 предназначен для поддержания головы пациента в положениях лежа на спине и лежа лицом вниз. Благодаря трем осям вращения, конструкция подголовника, обеспечивает широкий диапазон регулировок по высоте, углам наклона и глубине относительно ложа операционного стола. При снятии умягченных элементов подголовника, на европланку можно установить другие принадлежности, например, роликовый держатель WS-88.5 для вертебральных операций.

Подголовник состоит из двух бесшовных (литых) полиуретановых матрасов с возможностью регулировки расстояния между ними и металлического каркаса, выполненного из нержавеющей стали с матовой отделкой.

В подголовнике достаточно места для анестезиологической маски, интубационных трубок и другого анестезиологического оборудования.

Возможность регулировки ширины подголовника, а также, регулировки подголовника по высоте, глубине и углу наклона.

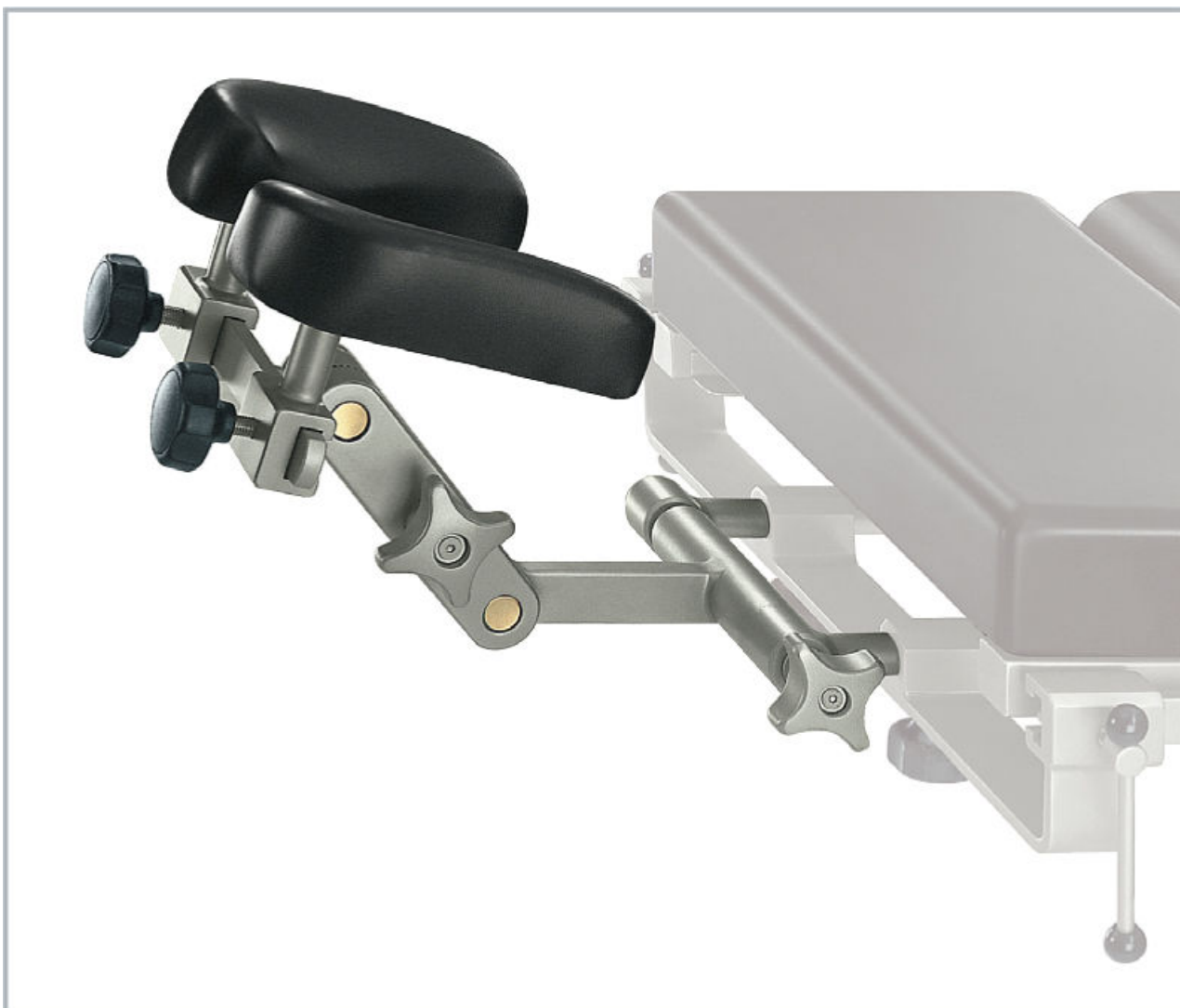

Подголовник специальный

Специальный подголовник WS-21.11 предназначен для поддержания головы пациента в положениях полулежа и лежа, как лежа на спине, так и лицом вниз. Надежная двухшарнирная система с одним зажимным рычагом, обеспечивает простую и точную регулировку высоты, глубины и угла наклона подголовника.

Подголовник совместим со специальными гелевыми подушками (см. раздел "СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРАЦЫ").

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса подковообразной формы.

Габариты рабочей части: 235мм x 190мм x 70мм

Возможность регулировки подголовника по высоте, глубине и углу наклона.



Головная секция дополнительная

Специальная секция WS-45.5 предназначена для поддержания головы пациента в положениях лежа на спине, лежа на боку, а, при использовании дополнительного гелевого матраца - лежа лицом вниз.

Благодаря трем осям вращения, конструкция подголовника, обеспечивает широкий диапазон регулировок по высоте, углам наклона (от 0° до 90°) и глубине относительно лежа операционного стола. Матрац секции легко снимается и устанавливается, что обеспечивает простую и надежную мойку и дезинфекцию.

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой, опорной части из HPL-пластика и съемного бесшовного (литого) полиуретанового матраца.

Габариты рабочей части: 235мм x 190мм x 70мм

Возможность регулировки секции по высоте, глубине и углу наклона.



Головная секция дополнительная

Специальная секция WS-45.6 предназначена для поддержания головы пациента в положениях лежа на спине, лежа на боку, а, при использовании дополнительного гелевого матраца - лежа лицом вниз.


Надежная двухшарнирная система с одним зажимным рычагом, обеспечивает простую и точную регулировку высоты, глубины и угла наклона подголовника. Матрац секции легко снимается и устанавливается, что обеспечивает простую и надежную мойку и дезинфекцию.

Небольшая рейка для принадлежностей, имеющаяся с внешней стороны подголовника, позволяет установить роликовый держатель WS-88.5 (не входит в комплект) для вертебральных операций. Головная секция совместима со специальными гелевыми подушками (см. раздел "СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРАЦЫ").

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой, опорной части из HPL-пластика и съемного бесшовного (литого) полиуретанового матраца.

Габариты рабочей части: 235мм x 190мм x 70мм

Возможность регулировки секции по высоте, глубине и углу наклона.

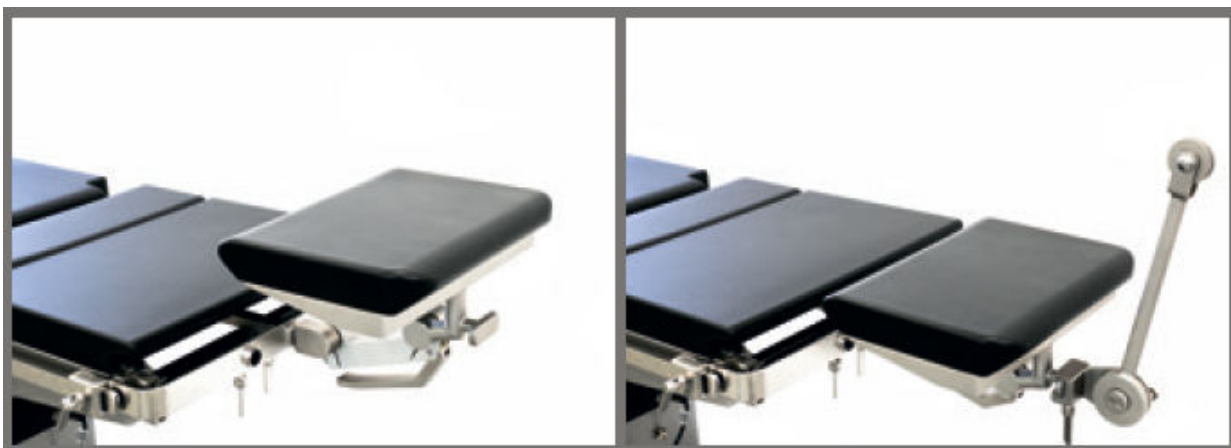

Опора для рук хирурга

Опора для рук WS-22.5 предназначена для поддержания запястья оперирующего хирурга как в положении стоя, так и в положении сидя.

Достаточно жесткий, но удобный С-образный матрас из формованного полиуретана, возможность плавной регулировки высоты и вертикальных наклонов опоры, обеспечивают комфорт для хирурга даже во время многочасовых операций. Благодаря двум шаровым шарнирам и двум мультипозиционным держателям, опору для рук хирурга можно разместить как строго по центру над головой пациента, так и отклонив ее влево или вправо.

Конструкция опоры состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса в форме полукольца.

Габариты рабочей части: 400мм x 325мм x 60мм

Возможность регулировки опоры по вертикали, по горизонтали, по глубине ложа и по углу наклона.



Головная секция с двумя регулируемыми плоскостями
DUAL-JOINT HEADREST

Специальная головная секция на всю ширину ложа операционного стола с дополнительной второй точкой поворота, позволяющей приподнять шейный отдел позвоночника или заменить гелевые матрацы под головой пациента (особенно в боковом положении).

Подголовник имеет матрас, который можно снять для дезинфекции, и двойной рычаг для установки желаемого положения.

Конструкция подголовника состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой, двух опорных частей из HPL-пластика и съемного бесшовного (литого) полиуретанового матраца.

Возможность двойной регулировки секции по углу наклона.

Ширина секции соответствует ширине ложа конкретной модели операционного стола.




Валик для шеи

В положении лежа на спине валик WS-68.0 позволяет дополнительно приподнять шейный отдел позвоночника и обеспечить дополнительный доступ к операционному полю. Кроме того валик для шеи стабилизирует тело пациента во время операции.

При необходимости валик можно использовать для приподнятия других частей тела пациента, например в области коленей.

Габариты: 420мм x 160мм x 80мм

Валик полностью R-прозрачен.

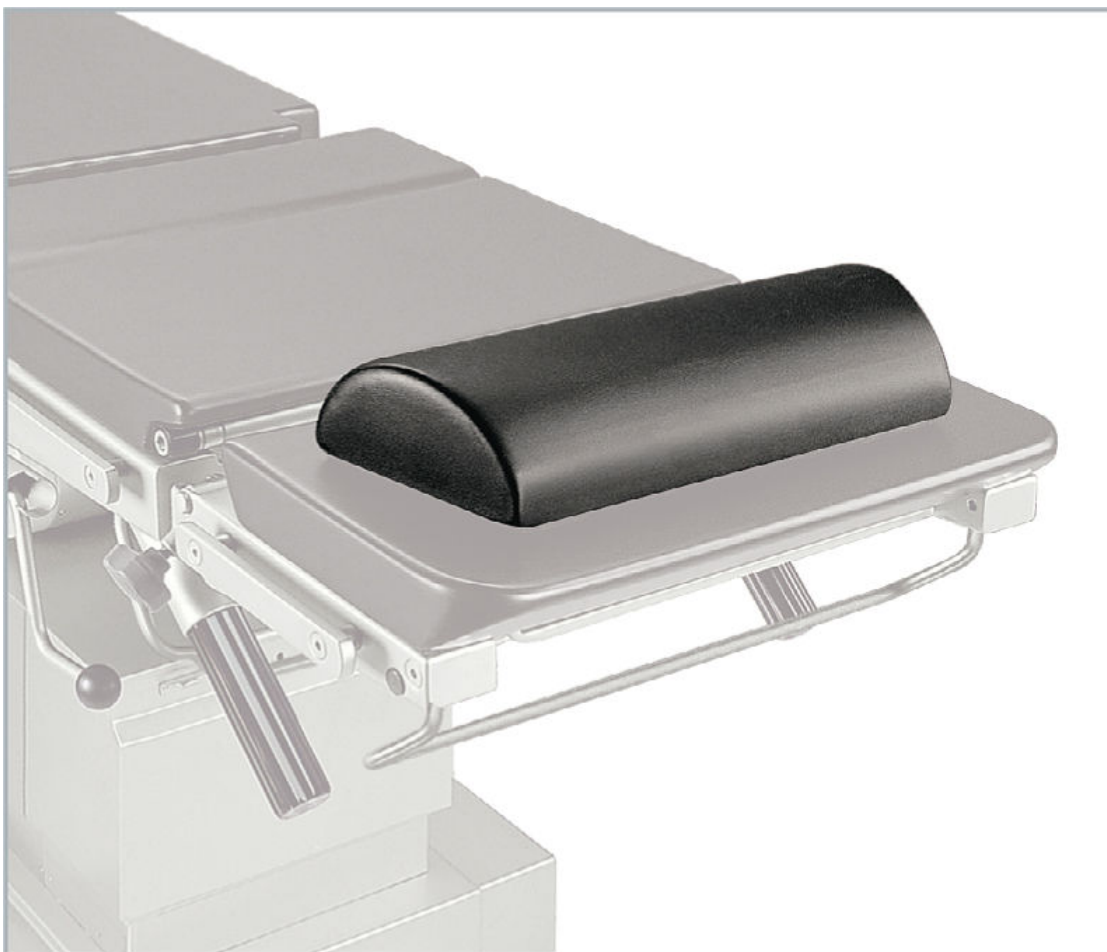

Валик для головы

Валик WS-69.0 для положения лежа на спине используется для поддержки головы пациента во время операций. Профилированная форма валика позволяет обеспечить дополнительный подъем головы пациента под разными углами, чтобы дать дополнительный доступ к операционному полю.

Габариты: 420мм x 220мм x 80мм

Подголовник прозрачен для рентгеновских лучей.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47