

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Каталки для пациентов Spark. Описание



SPARK

НЕЗАУРЯДНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

Famed SPARK - это принципиально новая конструкция, проверенная в десятках стран: экономичная, функциональная и прочная тележка для транспортировки пациентов. Антибактериальные свойства синтетических материалов и лакированных элементов сочетаются с низкими затратами на обслуживание и непревзойдённой долговечностью.



БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

- Боковые поручни защищают пациента на длине более 1500 мм. Не имеет острых краёв и опасных мест, в которых могут застрять пальцы.
- Большая максимально допустимая нагрузка (SWL) 250 кг позволяет безопасно транспортировать самых тяжёлых пациентов вместе с необходимым оборудованием.
- Антибактериальная нанотехнология с содержанием серебра pSilver™ в лаке, пластиковых элементах и наматраснике
- облегчает дезинфекцию и препятствует развитию бактерий.
- Устойчивые большие колеса облегчают транспортировку по неровной поверхности и обеспечивают абсолютную устойчивость тележки.



НЕЗАУРЯДНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Совместимость с мобильными рентгеновскими аппаратами (прикроватный аппарат, С-образная дуга), опциональные туннели для рентгеновских кассет.
- Рычаги регулировки высоты, доступные с обеих сторон тележки, позволяют наблюдать за пациентом в процессе изменения высоты.
- Тележка совместима с рядом аксессуаров – таких как полка для медицинских мониторов, пятое колесо, держатель кислородного баллона и другие.
- Опционально доступен матрас с ручками для переноски пациента и ремнями, фиксирующими его тело на матрасе.
- Простое в использовании двухсегментное (WP-02.0) или трехсегментное (WP-02.1) ложе для лёгкого позиционирования.
- Вместительная корзина для вещей пациента, расположенная в основании тележки, позволяет поддерживать порядок.



ВЫСОКАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ РАБОТЫ

- Отсутствие щели между кроватью и тележкой при перекладывании пациента* позволяет минимизировать усилия медицинского персонала и риск падения.
- Боковые поручни опускаются не только ниже матраса, но и самого ложа – это облегчает безопасное соскальзывание с матраса при вставании и защищает поручни от повреждений.
- Для перемещения тележки имеется две пары ручек, а кроме того, на сегменте спины имеется ещё одна эргономичная ручка для катания тележки по коридорам больницы.
- Направляющее колеса и опциональное 5-е колесо делают маневрирование чрезвычайно простым даже с тяжёлыми пациентами.

* относится к тележке и кровати производства Famed Żywiec. Щель между тележкой и кроватью может отсутствовать и при использовании некоторых других изделий, имеющих на рынке.



- A** 1500 мм длиной. Прочные, существенно выступающие над матрасом, поручни SafeDrop™ надёжно защищают пациента от падения.
- B** Снятие блокировки одной рукой. Другой рукой при этом можно придерживать пациента или держать другое медицинское оборудование.
- C** Поручни опускаются ниже уровня ложа. Безопасность и эргономичность работы.
- D** Отсутствие щелей при перекладывании пациента с тележки на кровать. Полная совместимость с медицинскими кроватями Famed.
- E** Профилированная конструкция обтекаемой формы. Лёгкая дезинфекция и безопасное вставание с тележки.




БЕЗОПАСНОСТЬ БАРЬЕРОВ SAFEDROP™

Настоящий "zero gap transfer" и полная безопасность – поручни опускаются ниже ложа.

Конструкция барьеров SafeDrop™ прошла испытания, превышающие требования к больничным тележкам согласно стандарту PN-EN 60601-2-52. А кроме того, барьеры выдерживают вертикальное давление более 100 кг. Лабораторные испытания также включали удары с разных сторон, подтверждающие устойчивость и прочность конструкции.

Боковые поручни SafeDrop™ опускаются ниже ложа абсолютно по всей своей длине, не создавая препятствий для пациента при спуске с тележки. Благодаря тщательно продуманной конструкции практически полностью исключено пространство, возникающее после приближения тележки к больничной койке. Барьеры Famed SPARK идеально взаимодействуют с поручнями наших кроватей. Всё это обеспечивает большую безопасность пациентов и требует меньшей физической нагрузки от персонала. Поручни SafeDrop™ можно опустить одной рукой, а обтекаемая конструкция значительно ускоряет очистку.

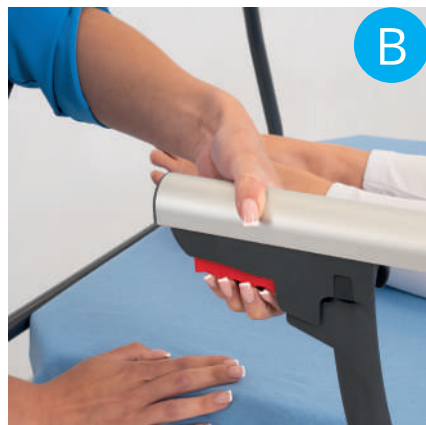

МАТРАСЫ



Пенополиуретановый матрас с прочным антибактериальным покрытием

На протяжении нескольких десятилетий мы занимаемся, кроме прочего, производством матрасов для медицинской техники, конструкция которых обеспечивает долгие годы беспроблемной эксплуатации. То же самое можно сказать и про тележку SPARK.

- антибактериальное покрытие со слоем, обеспечивающим водонепроницаемость и повышенную устойчивость к царапинам,
- высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам, моче и крови,
- огнеупорное покрытие (CRIB 5; BS 5852 на уровне 5),
- толщина 80 мм, большая граматура 650 г/м², [5]
- вырезы в углах для облегчения работы с тележкой и переноски пациента, [2]
- плотный высококачественный пенополиуретан T35,
- опциональный транспортировочный матрас (модель WW-14) с прочными держателями [1] и механизмом для соскальзывания снизу, [4]
- простая и быстрая сборка с помощью четырёхточечной системы Velcro®, [3]
- вырезы в пенополиуретане, нивелирующие давление на позвоночник и минимизирующие скручивание матраса при регулировке сегментов ложа.

ЛОЖЕ

Варианты - двухсекционное (WP-02.0) и трёхсекционное (WP-02.1)

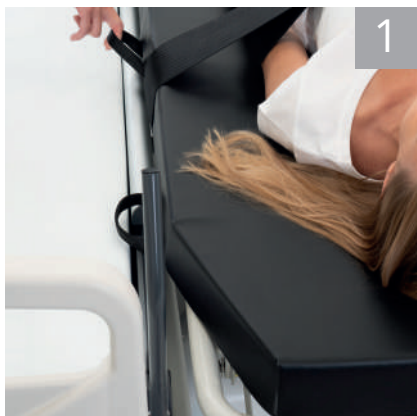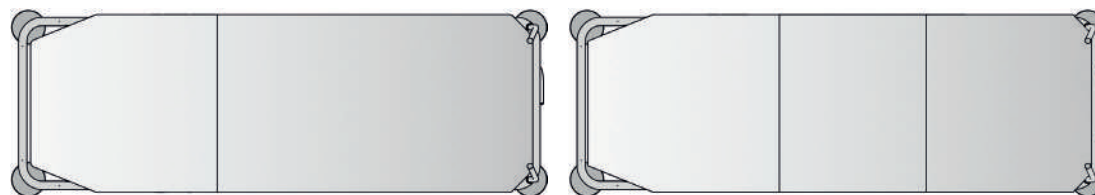




РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Famed SPARK – это активный партнёр в создании медицинских изображений пациента.

Неважно, отправляетесь ли вы в стационарную лабораторию визуальной диагностики, в которой конструкция тележки обеспечит комфортный подъезд к рентгеновскому аппарату, или вы пользуетесь прозрачностью ложа и делаете рентгеновские снимки при помощи мобильной С-образной дуги, SPARK станет вашим верным спутником в повседневной работе. Вы можете также заказать версию с туннелями для кассет и использовать прикроватный рентгеновский аппарат.

- Опциональные туннели для рентгеноскопии расположены непосредственно под ложем (к сегменту спины доступ осуществляется спереди тележки, а в остальных сегментах кассеты вставляются сбоку). Туннели совместимы со стандартными размерами рентгеновских кассет.
- Матрас с ручками для переноски и вырезами облегчает переноску пациента на рентгеновскую аппаратуру. Матрас является прозрачным для рентгеновских лучей.
- Большое пространство между основанием тележки и ложем позволяет использование С-образной дуги.

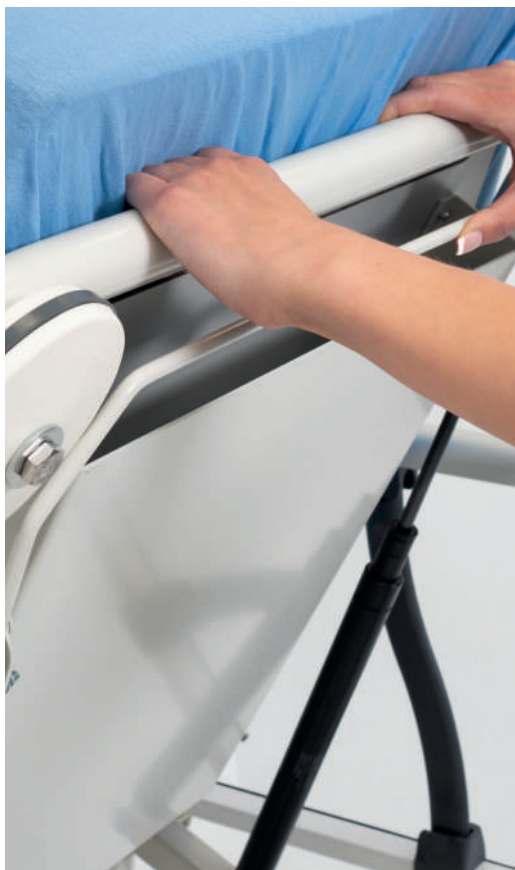



ЛЁГКОСТЬ МАНЕВРИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проверенная конструкция тележки, использующая современные методы управления и перемещения по коридорам больницы.

- ручки для перевозки, интегрированные с ложем,
- ручки для перевозки со стороны головы пациента,
- специальные пространства в плите опоры спины, служащие держателем,
- надёжные барьеры, позволяющие перекачивание тележки,
- большие двойные ножные блокировки с доступом с трёх сторон,
- высокая проходимость - большие колёса и большой дорожный просвет,
- направляющее колеса для лёгкого преодоления длинных коридоров и крутых поворотов даже при управлении тележкой одним человеком,
- опциональное пятое колесо ещё больше улучшает проходимость и манёвренность тележки,
- встроенное изголовье удерживает матрас на месте и позволяет повесить аксессуары.



Профилированный матрас облегчает переноску и обслуживание пациента

Работа с поручнями одной рукой

Матрас толщиной 80 мм с антибактериальным покрытием, опциональный матрас для переноски пациента

Две пары ручек для перемещения

Изголовье удерживает матрас и также позволяет монтаж дополнительного оборудования

Два места для установки капельницы в боковых поручнях

Поручни, опускающиеся ниже ложа

Ёмкость для вещей пациента в основании тележки

4 пластмассовых ограничителя

Рычаги блокировки со стороны головы (опция)

Корзина для кислородного баллона (опция)

Рычаг регулировки наклона тренделенбурга

Ложة прозрачная для рентгеновских лучей с возможностью использования С-образной дуги

Рычаг регулировки высоты

Пятое колесо (опция)

Крышки из ABS по антибактериальной технологии pSilver™

Рычаги блокировки и направляющего колеса

Большие колёса, облегчающие маневрирование





Технические данные

Общая длина	2040 mm
Внешняя ширина с поручнями (без поручней)	790 mm (700 mm)
Ширина матраса	660 mm
Толщина матраса	80 mm
Регулировка высоты (мин. - макс.)	600 - 900 mm
Максимальный угол подъёма опоры спины	70°
Максимальный угол опускания сегмента ног (WP-02.1)	-35°
Наклон тренделенбурга / анти-тренделенбурга	23° / 12°
Максимальная нагрузка (SWL)	250 kg
Диаметр колеса	200 mm
Совместимость с кислородным баллоном (опция - WL-38.2)	3-6 l

Оptionальное оснащение и аксессуары:

- Штатив для капельницы. [WK-16.0]
- Складной штатив для капельницы
- Пятое колесо [PK-03.0]
- Штатив для полотенца [WW-15.0]
- Держатель для кислородного баллона [WL-38.2]
- Туннели для рентгеновского поддона [WL-38.6] (двухсекционное ложе, WP-02.0), [WL-38.7] (трёхсекционное ложе, WP-02.1)
- Полка для монитора [WL-38.3]
- Матрас для переноски пациента [WW-14.0]
- Защитный ремень для пациента [WW-12.0]
- Два дополнительных рычага блокировки [WL-38.4]
- Крючок для мешочков [WL-18.2]

Конфигурация

Функциональность	Famed SPARK (WP-02.0)	Famed SPARK (WP-02.1)
Боковые поручни SafeDrop™ PB-10.4 (+ ведущие держатели)	○	○
Двухсекционное ложе	●	-
Трёхсекционное ложе (подвижная секция ног)	-	●
Ведущие держатели со стороны ног	●	●
Пенополиуретан 80 мм – чёрный цвет	●	●
Пенополиуретан 80 мм – другой цвет	○	○
Пенополиуретановый матрас, облегчающий перекладывание пациента	○	○
Центральная блокировка колёс	●	●
Два дополнительных рычага блокировки со стороны головы (WL-38.4)	○	○

ЛЕГЕНДА: - НЕТ | ○ ОПЦИЯ | ● СТАНДАРНО



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru